




STANDARD™ Q

COVID-19 IgM/IgG Duo

Наборы для проведения экспресс-теста для качественного выявления и дифференциации антител IgM / IgG к новому коронавирусу SARS-CoV-2 в образцах капиллярной, венозной крови, сыворотки или плазмы крови человека

REF Q-NCOV-01D

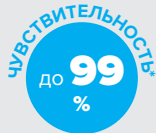


* Чувствительность при использовании капиллярной крови – 92%; при использовании венозной крови, плазмы или сыворотки чувствительность возрастает до 99%

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Простота применения.
- Ультрабыстрое получение результатов анализа с последующим принятием решения об изоляции.
- Тесты определяют образование антител, что является основанием для дальнейшего эпидемиологического обследования пациента.

Динамика периодов развития коронавирусной инфекции COVID-19

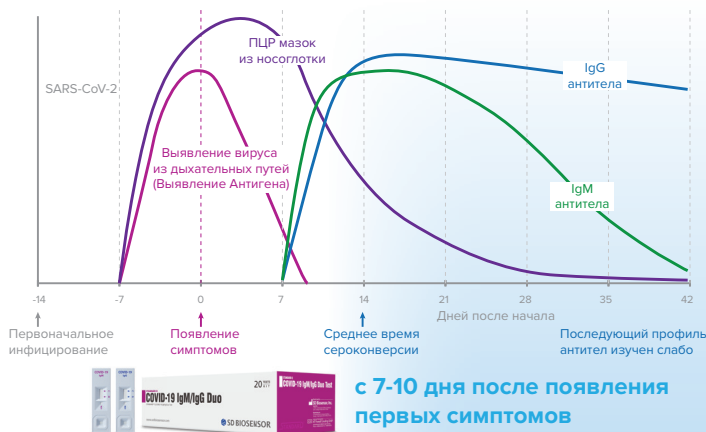

Тесты на наличие антител **IgM** методом ИХА могут применяться уже **с 7-10 дня после появления первых симптомов**, когда в организме начинают вырабатываться антитела класса **IgM**. Тесты на наличие антител **IgG** методом ИХА могут применяться уже **с 10-14 дня после появления первых симптомов**, когда в организме начинают вырабатываться антитела класса **IgG**.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- **Метод исследования:** беспробирный иммунохроматографический анализ (ИХА).
- **Цель анализа:** выявление и дифференциация антител IgM/IgG.
- **Биоматериал:** капиллярная кровь из пальца, плазма, сыворотка, венозная кровь.
- **Время проведения одного теста:** 10-15 мин.
- **Результаты теста:** позитивный/негативный/недействительный.
- **Оборудование для проведения тестов:** не требуется.
- **Упаковка:** 20 или 4 теста.
- **Производитель:** SD BIOSENSOR, Южная Корея.
- **Сертификация:** Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) **№ РЗН 2020/10742 от 09.06.2020** 2020.03.05 декларация соответствия СЕ.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- **Тестовое устройство (индивидуально в фольге с осушителем)** — набор 20 (IgM)+20 (IgG) тест-систем
- **Флакон буферного раствора** — 1 флакон для 20 тест-систем



- **Капиллярная трубка (10 мкл)** — 40 трубочек в наборе

- **Инструкция по применению** — 1 инструкция